


VERRES-EINWEGNADELN

Mediflex stellt die wirtschaftliche Alternative zum Etablieren des Pneumoperitoneum in der laparoskopischen Chirurgie vor. Die Mediflex Verres-Einwegnadeln haben einen ergonomischen rutschfesten Griff, eine scharfe Nadel (14 ga.), ein herkömmliches federbetätigtes stumpfes Stilet und ein durchsichtiges Gehäuse, um einen Tropfentest zu erleichtern. Erhältlich in den Längen 120 und 150 mm.

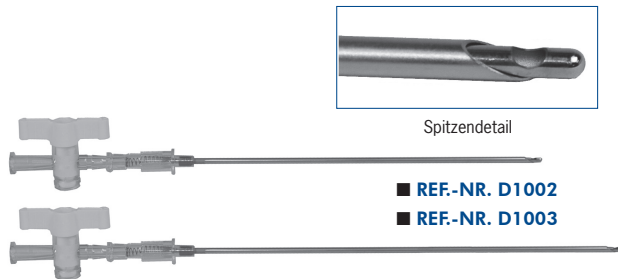

■ REF.-NR. D1002

■ REF.-NR. D1003

■ REF.-NR. D1002

120 mm Verres-Einwegnadeln, steril,
10 er-Packung

■ REF.-NR. D1003

150 mm Verres-Einwegnadeln, steril,
10 er-Packung

CHOLANGIOGRAFIE-EINWEGKATHETER

Ob der Chirurg den Cholangiografiekatheter durch einen Trokar oder perkutan einführt ...ob er eine unnachgiebige Spitze oder einen flexiblen Katheter bevorzugt, Mediflex hat das richtige Produkt für Sie.

■ REF.-NR. D1004

Ein flexibler 42,8 cm Katheter, der in offenen oder laparoskopischen Eingriffen verwendet werden kann. Komplett mit 14 ga. Perkutaneinleiter. Steril, 10 er-Packung.

■ REF.-NR. D1005

Ein Katheter mit verjüngter, geperlter Spitze 27,8 cm und radioluzentem 5 mm Einführungsschaft und Gasdichtung. Für laparoskopischen Gebrauch durch 5 mm Trokar/Kanüle. Steril, 6 er-Packung.

■ REF.-NR. D1006

Ein Katheter mit verjüngter, geperlter Spitze 23,5 cm und 14 ga. Perkutaneinleiter. Steril, 10 er-Packung.




■ REF.-NR. D1004



Spitzendetail



Spitzendetail

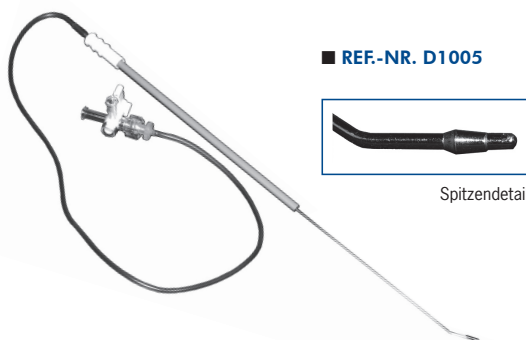

■ REF.-NR. D1005



Spitzendetail



■ REF.-NR. D1006



Spitzendetail



Spitzendetail